

## FICHA TÉCNICA



**MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL  
TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO**

- **Referência:** MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO
- **Modelo:** CAMADA TRIPLA COM ELÁSTICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
- **Dimensão ANVISA:** 17.5CM x 9.5CM
- **Matéria-Prima:** TNT (TECIDO NÃO TECIDO)
- **Gramatura:** 20G/M2, 26G/M2, 20G/M2
- **Validade:** 5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO-
- **Performance BFE (Eficiência de Filtragem Bacteriana):** ≥95%
- **Performance EFP (Eficiência de Filtragem por Partículas)** ≥98%
- **Instrução Normativa:**  
ABNT NBR 15052:2004 - ABNT NBR 14873:2002  
RDC ANVISA Nº 448/2020

**DESCRIÇÃO**

Máscara Cirúrgica Descartável, composta de 3 ( três ) camadas:

### MODELO TNT+SMMS (SINERGEX ONE)+TNT

- ❖ 2 Camadas de Tecido Não Tecido ( TNT - Spunbond ) => 20G/M2
- ❖ 1 Camada de Tecido Não Tecido Hidrofóbico => 26G/M2, Tecnologia SYNERGEX ONE, formado por filamentos contínuos de polipropileno, através de tecnologia Spunbond/Spunmelt, A exclusiva Tecnologia SYNERGEX ONE, proporciona retenção bacteriana mais eficaz. As camadas são unidas através do processo de selagem por Ultrassom, não envolvendo calor.

### MODELO TNT+TNT+TNT

- ❖ 3 Camadas de Tecido Não Tecido ( TNT - Spunbond ) => 20G/M2
- ❖ Orientações: Produto de uso individual com Elásticos Laterais para fixação atrás das orelhas, e Clipe Nasal de Metal Maleável e Revestido, com a finalidade de adaptação ao contorno do nariz e das bochechas, visando a proteção contra agentes contaminantes das vias respiratórias, devendo também impedir a passagem de saliva e fluídos corpóreos (perdigotos), e minimizar a contaminação

FICHA TÉCNICA

do ambiente com secreções respiratórias. O produto é descartável, devendo ser usado uma única vez.

- ❖ Indicação de Uso: Proteção PROFISSIONAL e DOMÉSTICA - Indicado para uso em Centro Cirúrgico, Hospitais, Clínicas, Consultórios Odontológicos, Indústria Alimentícia, Manipulação de Alimentos e Estabelecimentos Similares.

COMPOSIÇÃO E DETALHES TÉCNICOS

MODELO TNT+SMMS+TNT


2 Camadas de TNT (SPUNBOND)	TNT
	+
1 Camada de SMMMS (MELTBLOWN)	SMMMS
	+
	TNT
TNT DUPLO + UMA CAMADA DE NÃO TECIDO FILTRANTE TECIDO HIDROFÓBICO	
100% polipropileno	

MODELO TNT+TNT+TNT

3 Camadas de TNT (SPUNBOND)	TNT
	+
	TNT
	+
	TNT
TNT TRIPLO	
100% polipropileno	

## FICHA TÉCNICA

- ❖ Aspecto Visual: Isento de manchas, contaminações e sujeiras.
- ❖ Armazenamento: Protegido de Intempéries.

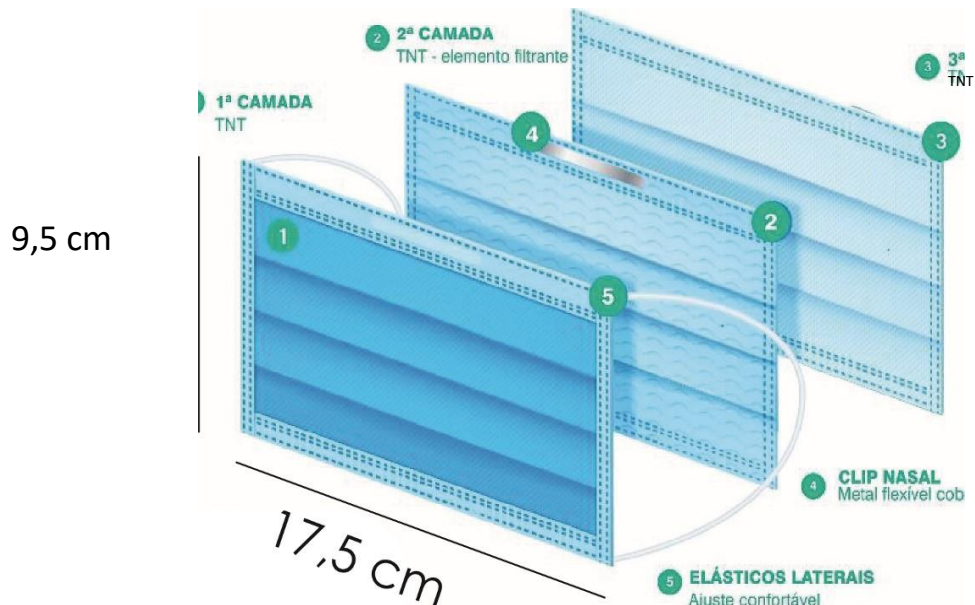

### CORES DISPONÍVEIS

Branca, azul, preta, verde, rosa.

### FOTOS

Máscara



Pacote plástico



caixa papel couche

## **FICHA TÉCNICA**

### **APRESENTAÇÃO COMERCIAL**

Máscaras embaladas e acomodadas em caixas ou pacotes plásticos devidamente identificadas com seu modelo, cor e quantidades. Embalagens com 50 unidades; 1 ;2 ;5 ;10 ;20 e 100 unidades.

### **CONTRA INDICAÇÕES**

Nenhuma conhecida.

### **INSTRUÇÕES DE USO**

Retirar da embalagem ajustar na face encaixando os elásticos atrás das orelhas e pressionar o clip no nariz. Descartar após o uso em local adequado.

### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS:**

- ❖ Econômica
- ❖ Tripla Proteção
- ❖ Descartável
- ❖ Anatômica
- ❖ Confortável
- ❖ Facilita a Respiração
- ❖ Clip Nasal
- ❖ Não Inflamável
- ❖ Atóxica
- ❖ Produto Descartável
- ❖ Eficiência de filtragem de bactérias e partículas : BFE  $\geq$  95%  
EFP  $\geq$ 98%

### **VALIDADE:**

5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.